


# Ортодонтический имплантат Radix-Mini

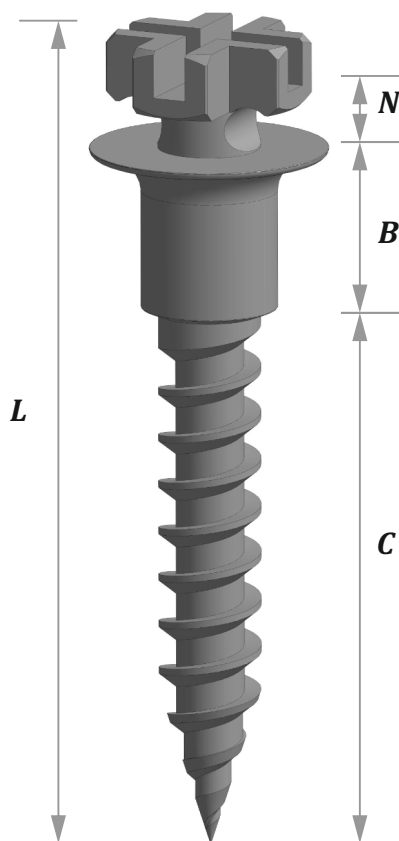


- Шейка имплантата высотой 0.75 или 1.5 мм служит для фиксации эластических элементов.
- Гладкая полированная внутрислизистая манжетка предотвращает формирование бактериального налета. Диаметр манжетки больше, чем диаметр резьбы. Это позволяет врачу во время установки имплантата почувствовать момент, когда манжетка упрется в надкостницу.
- Резьба диаметром 1.5 мм имеет специальный ассиметричный профиль, который препятствует самопроизвольному выкручиванию имплантата.

| код    | длина резьбы<br>C, mm | высота манжеты<br>B, mm | высота шейки<br>N, mm | длина имплантата<br>L, mm |
|--------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------------|
| B10615 | 6                     | 1.5                     | 0.75                  | 9.2                       |
| B10625 | 6                     | 2.5                     | 0.75                  | 10.2                      |
| B10815 | 8                     | 1.5                     | 0.75                  | 11.2                      |
| B10825 | 8                     | 2.5                     | 0.75                  | 12.2                      |
| B10835 | 8                     | 3.5                     | 1.5                   | 14.0                      |
| B11025 | 10                    | 2.5                     | 0.75                  | 14.2                      |

Отвертка

S200

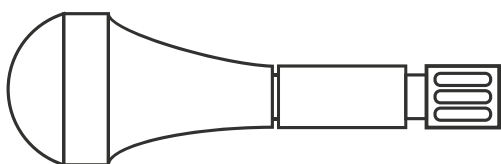

Бита  
короткая

G166



Бита  
длинная

G167



Бита  
под угловой наконечник

G168

